

# wiroPINNY S





## PE LATZSCHÜRZEN

Bindebänder in der Taille | glatt



PREMIUM

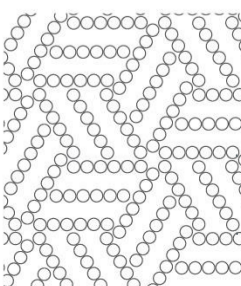

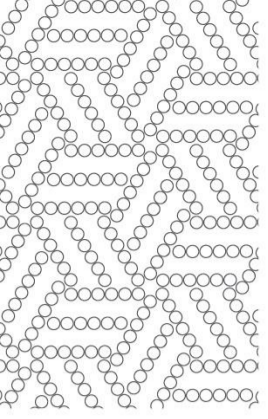

# wiroPINNY S



## Produktbeschreibung

Marke	care & serve®
Kategorie	PREMIUM
Artikelbezeichnung	- care & serve® - PREMIUM   wiroPINNY S   PE Latzschürzen Bindebänder in der Taille   glatt
Eigenschaften	Bindebänder in der Taille glatt

## MDR/PSA Verwendung

Verwendungszweck	Medizinische Schutzkleidung im Sinne der Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) zur Vermeidung von Kontamination der Arbeits- oder Privatkleidung bei Eingriffen oder Pflegemaßnahmen durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten, Exkreten oder anderem kontaminiertem Material.
Anwendungsbereich	Es erfolgt keine direkte medizinische Anwendung am Patienten. Medizinische Schutzkleidung dient der Abdeckung von Kleidung und/oder Haaren.
Anwendungsgruppe	Mitarbeiter und Besucher von Laboren, der Pharmaindustrie, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen.
Patientengruppe	Medizinische Schutzkleidung sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Medizinische Kleidung als Barriere zum Abdecken der Kleidung und/oder der Haare.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.




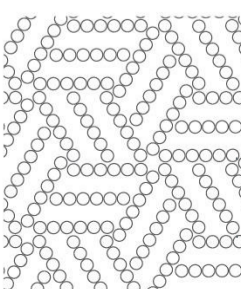
## Material


Material	Polyethylen
Materialstärke	≈ 0,018 mm (± 5 %)
Materialhinweis	latexfrei
Gesundheitshinweis	Dieses Produkt enthält keine bekannten toxischen, karzinogene, mutagene, reproduktionstoxische oder auf andere Weise schädliche Substanzen oder Allergene.  Der Kontakt mit der Haut kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Ziehen Sie das Produkt in diesem Fall unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorgaben aus und suchen Sie einen Arzt auf.



## Standards

CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745														
SRN	DE-MF-000004956														
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN														
EUV 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen														
EG 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produktverwendung</th> <th>Ergebnis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lebensmittelkontakt</td> <td>Direkter Lebensmittelkontakt</td> </tr> <tr> <th>Spezifikationen zur Verwendung</th> <th>Ergebnis</th> </tr> <tr> <td>Vorgesehene Lebensmittelarten</td> <td>Alle Lebensmittel</td> </tr> <tr> <td>Vorgesehene Bedingungen</td> <td>2 Stunden bei 40 °C</td> </tr> <tr> <td>Geprüftes Oberflächen-/Volumenverhältnis</td> <td>2 dm<sup>2</sup> zu 100 ml Prüflebensmittel</td> </tr> </tbody> </table>	Produktverwendung	Ergebnis	Lebensmittelkontakt	Direkter Lebensmittelkontakt	Spezifikationen zur Verwendung	Ergebnis	Vorgesehene Lebensmittelarten	Alle Lebensmittel	Vorgesehene Bedingungen	2 Stunden bei 40 °C	Geprüftes Oberflächen-/Volumenverhältnis	2 dm <sup>2</sup> zu 100 ml Prüflebensmittel		
Produktverwendung	Ergebnis														
Lebensmittelkontakt	Direkter Lebensmittelkontakt														
Spezifikationen zur Verwendung	Ergebnis														
Vorgesehene Lebensmittelarten	Alle Lebensmittel														
Vorgesehene Bedingungen	2 Stunden bei 40 °C														
Geprüftes Oberflächen-/Volumenverhältnis	2 dm <sup>2</sup> zu 100 ml Prüflebensmittel														
	Informationen														



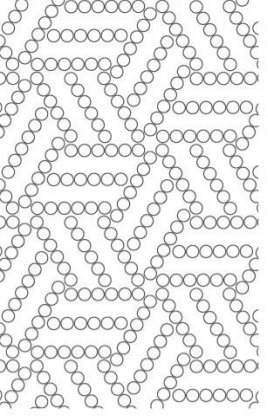

# wiroPINNY S



Die Lebensmitteleignung bezieht sich im Allgemeinen auf das Material. Es wird nur das Material geprüft, nicht jedes Produkt.

## Anwendung

Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2121 +
Gebrauchsanweisung	<p><b>Vor dem Gebrauch</b> Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen, im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten begrenzt.</p> <p><b>Handhabung</b> Die gefaltete Schürze auseinanderfalten. Die Halsschleife über den Kopf ziehen und um den Hals legen. Die Schürzen nach unten leicht glattstreichen und die Bindebänder im Rücken oder seitlich verknoten. Zum Ausziehen die Halsschleife im Nacken zerreißen und den Latz nach unten klappen, dann die Bindebänder im Rücken zerreißen und die Seiten nach vorne zusammenklappen, so dass die saubere, nicht kontaminierte Fläche der Schürze außen ist und die kontaminierte Fläche innenliegt. Um einen versehentlichen Kontakt mit der kontaminierten Fläche zu verhindern, sollte die Schürze nicht zerknüllt, sondern zum Entsorgen weiter gefaltet werden.</p>
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>



## Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.
-----------	---





## WWW

PDF IFU	<a href="https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroPINNY-S.pdf">https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroPINNY-S.pdf</a>
---------	---

## Variante 1

Variantenmerkmal	geblockt			
Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton			
Unterverpackung	50 Stück/Polybeutel			
Mindestbestellmenge	1 Karton			
Artikelnummern	<b>Artikelnummer</b>	<b>Farbe</b>	<b>Größe (B x L)</b>	<b>Toleranz</b>
	20105303	weiß	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	blau	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	grün	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	rot	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	gelb	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	weiß	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	blau	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

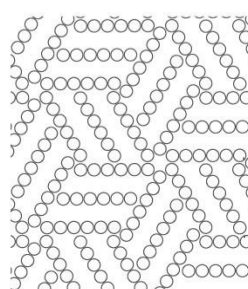

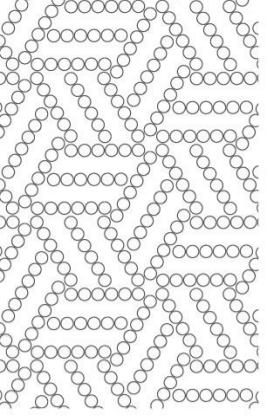

# wiroPINNY S



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.

